

小型超声波清洗机

GT-U1

使用说明书

感谢您使用本系列产品

请在使用产品前阅读使用说明书


请保存好此使用说明书

目录

01. 部件名称	2
02. 注意事项	2-5
03. 清洗应用	5-6
04. 工作原理	6
05. 操作方法	7-8
06. 常用的清洗方法	8-9
07. 保养与维修	9
08. 保修说明	9-10

01. 部件名称

注意：开箱后请检查清洗机及配件是否齐全，是否有损伤、变形、开裂！

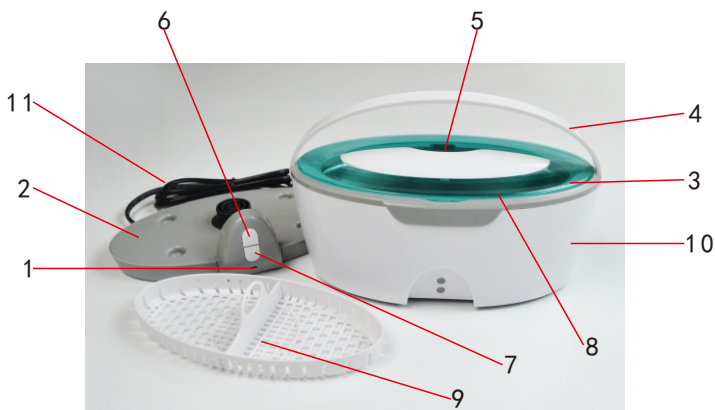

- | | | |
|----------|----------|--------|
| 1、LED指示灯 | 2、机型底座 | 3、透视窗 |
| 4、提手 | 5、LED指示灯 | 6、开/关键 |
| 7、时间控制键 | 8、SUS清洗槽 | 9、清洗篮 |
| 10、机型主体 | 11、电源线 | |

产品规格

名称	假牙清洗机	型号	GT-U1
超声功率	35W	超声频率	40kHz
内槽尺寸	178x85x36mm (LxWxH)	外形尺寸	226x130x118mm (LxWxH)
时间设定	五分钟自动定时	机子容量	450ml

02. 注意事项

1、儿童注意事项

//将清洗机和配件放置在儿童无法触及的地方;

//禁止儿童在没有监护人监督的情况下使用或清洗
维修保养此机器;

//禁止儿童玩耍包装盒及包装袋避免窒息的危险。

电击危险

//如机器，电源线或插头有明显可见损坏迹象，请
停止使用该清洗机;

//请将电源线连接在合规的插座上，并提供相匹配
的电源，确保连接后插座可以正常使用;

//清洗机器前，不使用机器时或雷暴天气时，请从插座上取下电源插头；

//请勿将清洗机或电源线浸入水或其他液体中；

//切勿对清洗机，电源线或配件进行任何改装，并私自使用非原厂外的配件；

//非专业人员，请勿拆卸清洗机，内部高压危险。

2、由潮湿引起的电击危险

//禁止用水冲洗整机，以防触电；

//请勿在浴缸，淋浴室，盥洗盆或其他含水容器附近使用这种清洗机；

//请勿将清洗机放在会掉入水中的地方；

//保护清洗机免受潮湿，滴水或溅水；

//不要用湿手触摸清洗机；

//如果清洗机掉入水中，请立即拔出电源插头，从水中拿出清洗机，不要再使用此机器，交由商家检测。

使用要点

//禁止在清洗槽内加入研磨，含腐蚀的化学溶剂，避免腐蚀缸体；

//禁止使用酒精、汽油或易燃液体，否则可能导致火灾或爆炸，造成的损坏不属保修范围；

//清洗槽内无水时，请勿开启清洗机。无水运行会损坏清洗机；




//加水时，请务必确保水位能浸泡要清洗物品，并且不要超过“MAX”标记；




//清洗物品时，请轻拿轻放；

//切勿将清洗机放在靠近热源或火源的地方

03. 清洗应用

此产品专为假牙清洗设计，可用于珠宝首饰类，钟表眼镜类，日用品类，文具类，金属配件类。

珠宝首饰类	眼镜钟表类	日用品类
		
项链、戒指、耳环、手镯等	眼镜、手表链、防水手表等	剃须刀、梳子、牙刷等

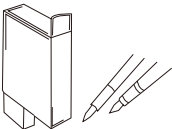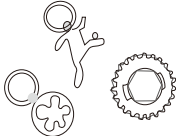文具类	金属配件类	牙科类
		
钢笔头、打印机喷头等	手表配件、古币、徽章等	假牙


04. 工作原理



水在超声波的作用下，形成数以万计的微小气泡。




这些气泡，在超声波的作用下，连续不断产生的瞬间高压，就像一连串小爆炸一样不断冲击物体表面。

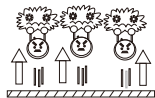


物体表面及缝隙中的污垢被迅速剥落，分解成小颗粒，进入水中。


05. 操作方法

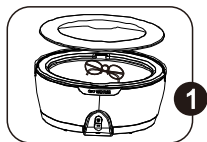


1、将干净的水或清洁液加入缸体并放入要清洗的物品（不要超过缸体最高水位线）。插上电源适配器，通电后按键指示灯：为橙色（待机）。注：加水量不能超过“MAX”水位线。

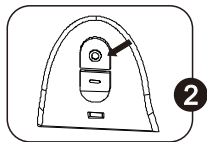


2、按下“ON”电源键，机器开启超声清洗工作，绿色指示灯亮。

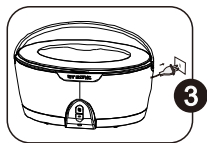

3、机器为固定工作时间（5分钟），定时到时自动关闭超声清洗，机器进入待机状态。

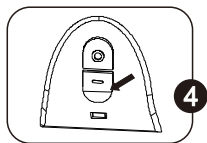


4、机器在工作状态下按“OFF”电源键机器停止工作，进入待机模式。

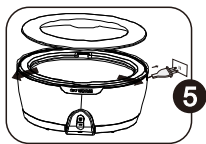


5、清洗之后，为了保证机器使用寿命，请立即将水倒掉。

06. 常用的清洗方法

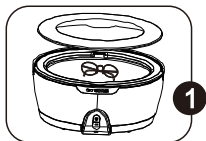


1、普通清洗

将机子放入适量的清水清洗,淹没清洗物即可,注:不可超过"MAX"水位标示。

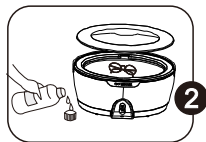


2、加强清洗

可加少许洗洁精(约15~20ml),可快速分解污垢,使超声波的清洗效果增强约20%。

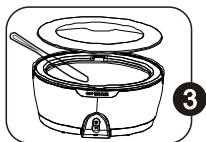

3、分段清洗

对于长度较长的物品,可按图示进行分段清洗。

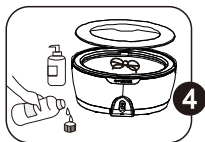

4、深度清洗

先使用"加强清洗", 然后换水, 加入10ml左右的消毒剂清洗即可。

07. 保养与维修

本机应定期对设备进行全面检查。

1、检查电源及输出线各接点有无松动、过热、受潮和接触不良现象。

2、检查清洗槽底板密封情况, 有无泄漏。
清洗槽的接缝处是否渗漏。

3、如发现超声设备及存放场所的通风、干燥、洁净等有利于设备的长期高效使用。

4、清洗结束后, 请拔掉电源, 并倒掉清洗槽的水;
请不要将水长时间放在清洗槽中

5、用干毛巾将清洗槽和机子表面水珠擦干;禁止用水直接冲洗, 以防触电!用完产品后将其存放于阴凉干燥处。

08. 保修说明

承蒙惠购固特超声假牙清洗机, 为了更好地为您服务, 请您在购买产品后, 填妥保修卡, 并要求经销商盖上销售章。

全国免费服务热线

400-699-1799

梅州(Add):广东省梅州市固特科技园

深圳(Add):深圳市宝安区西乡通成路旭生大厦19层

电话(Tel):0753-8123288/8123222

传真(Fax):0753-8123298

网址: <http://www.gtsonic.cn> 邮箱: sales@vgt.cc